

ワン・ツーフロテクター

前脚用 取り付け方 例



前脚用

抜群の伸縮性で簡単装着！



1. 保護したい脚に履かせます。

2. 穴を広げて反対の脚を入れます。


3. 背中のフリーマジックで留めます。

※サイズが合わない場合は、無理に使用しないで下さい。

ワンツーフロテクターの使い方ポイント フィットするための「ひと工夫」

ソックス部より脚が短い子の場合


切れ目を入れソックスの長さを短くする

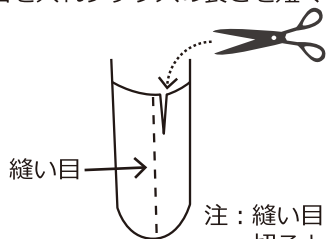

注：縫い目は切らないで下さい。
切るとほつれてしまいます。



穴より脚が太い子の場合

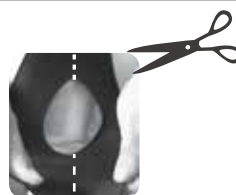

太さに合わせてはさみで切り込み、
穴を広げることが出来ます。



背中部分がゆるい場合



体型に合わせて長さを調整し
縫い合わせることが出来ます。



見てね♪

ホームページで
付け方・使用の様子を
動画でご覧いただけます。

ヒューベス ワンツーフロテクター 検索

URL: <http://www.huves.co.jp>



動物医療のトータルネットワーク

株式会社 ヒューベス

〒350-1317 埼玉県狭山市水野 432-4


tel: 04-2935-7644 ・ fax: 04-2935-7645

HIPR1706-4

ワン・ツー・プロテクター

処置材のズレ防止

後脚用 取り付け方 例

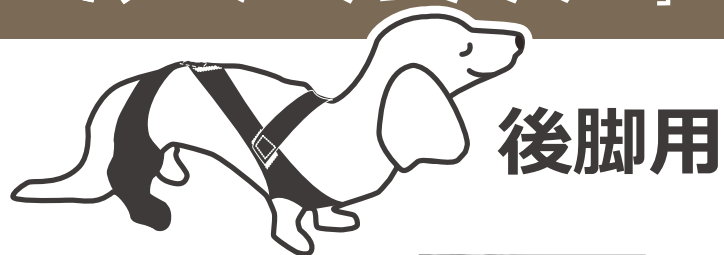

抜群の伸縮性で簡単装着！



1. 保護したい脚にプロテクター部を履かせます。



2. フリーマジックで反対側の帯部（フリーマジック）と合わせて留めます。



5. フリーマジックで留めます。



4. 反対側の前脚はスリット部に入れるか、そのまま肩に回します。（体型に合わせて）



3. 保護した側の前脚をスリット部に入れます。


※サイズが合わない場合は、無理に使用しないで下さい。

ワンツープロテクターの使い方ポイント

フィットするための「ひと工夫」

プロテクター部より脚が短い子の場合

切れ目を入れプロテクター部の長さを短くする。

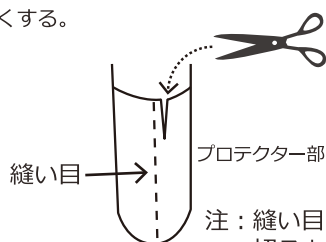

注：縫い目は切らないで下さい。切るとほつれてしまいます。




スリット部より脚が太い子の場合



太さに合わせてはさみで切り込み、スリット部を広げて下さい。



背中中の帯がゆるい場合

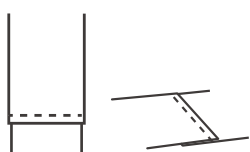

体型に合わせて長さを調整し縫い合わせて下さい。



見てね♪

ホームページで
付け方・使用の様子を
動画でご覧いただけます。


ヒューベス ワンツープロテクター 検索

<http://www.huves.co.jp>



ワン・ツーフロテクター

胴回り用 取り付け方 例

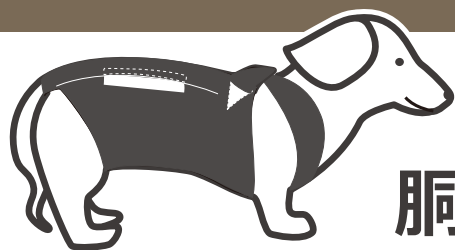

胴回り用


抜群の伸縮性で簡単装着！



1. ワンツーフロテクターをお尻
又は頭から履かせます。



2. 両後脚をスリット部に通します。

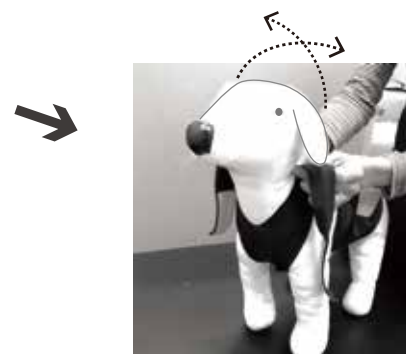

3. 帯部を前脚間から回し、
首の後ろで交差し
固定します。



胴回りの締め具合は、
フリーマジックで
調整出来ます。




※サイズが合わない場合は、無理に使用しないで下さい。

ワンツーフロテクターの使い方ポイント フィットするための「ひと工夫」

帯部が長い場合

体型に合わせ、帯部を重ね縫い
長さを調整して下さい。

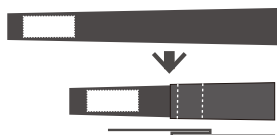

スリット部より脚が太い子の場合

スリット部



太さに合わせて
はさみで切り込み、スリット部を広げて下さい。



見てね♪

ホームページで
付け方・使用の様子を
動画でご覧いただけます。

ヒューベス ワンツーフロテクター 検索

<http://www.huves.co.jp>



動物医療のトータルネットワーク

株式会社 ヒューベス

〒350-1317 埼玉県狭山市水野 432-4

tel: 04-2935-7644 ・ fax: 04-2935-7645