

T-COMPACT | 設置場所・使い方が自在なAPR搭載コンパクトモデル

インターバルわずか10秒！スピーディーな撮影へ

DRに最適化したインターバル設計により、曝射後10秒で次の撮影が可能に。より効率の良いスピーディーな撮影を実現。

フットスイッチでランプ点灯

フットスイッチの1段目を踏むとコリメーターランプが点灯。両手が塞がる撮影時も足元だけでスムーズに制御できます。

コンパクトなオールインワンタイプ

T-COMPACTは、X線発生装置と制御器が一体になったオールインワンタイプなので、持ち運びがスムーズ。軟部組織から骨に至るまでの多種多様な撮影をカバーする、コンパクトかつ高出力なX線撮影装置です。



高効率・安定出力インバータ

特殊平滑回路によるインバータ方式の採用により、低リップルで安定したX線出力を実現。被ばく線量を低減し、短時間撮影を可能にします。

最適化されたAPR機能

撮影する動物の体重・部位を選択するだけで、小～中型動物に最適なkV/mAs設定が完了します。



仕様

方式	インバータ制御システム
定格出力	2kW
管電圧	40～100kV
管電流	15～30mA
mAs	0.3～50mAs
電源	AC100V:50/60Hz
選択モード	マニュアル、APR


パフォーマンス

30mA	40～60kV / 0.3～32mAs
25mA	61～80kV / 0.3～12mAs
20mA	40～60kV / 40～50mAs 81～100kV / 0.3～12mAs
15mA	61～80kV / 16～15mA 81～100kV / 16～50mAs


利用シーン

無影灯仕様

撮影台仕様

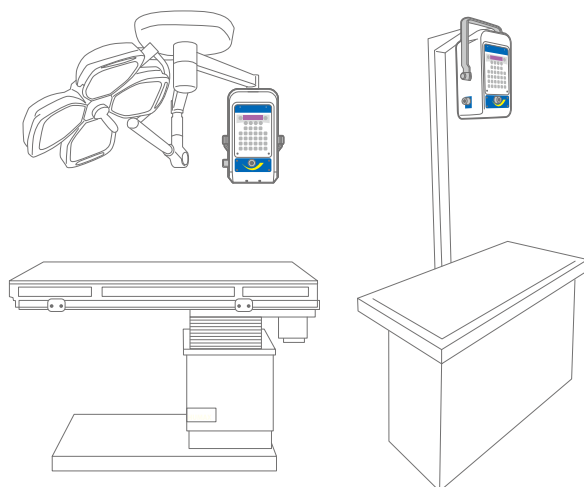

寸法図

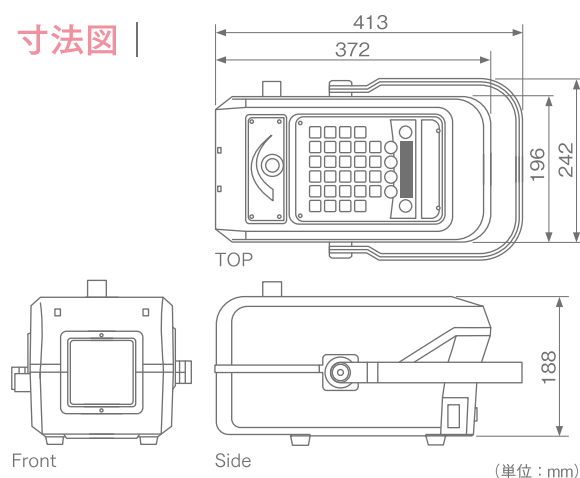

(単位：mm)

薬事承認番号：農林水産省指令22動薬第3626号

- 記載されている内容、外観及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- カタログの写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。

～医療用X線装置メーカーとして70年以上にわたり培ってきた開発技術と想いを継承～

製造元

T&S 株式会社 ティーアンドエス

〒278-0051 千葉県野田市七光台433-1

<https://ts-xray.com>

医療機器製造業 許可番号 12BZ005025

第二種医療機器製造販売業 許可番号 12B2X00022

第二種動物用医療機器製造販売業許可番号 30製販療Ⅱ第48号



販売元

umax 株式会社 ヒューベス

TEL:04-2935-7644 FAX:04-2935-7645

E-mail:info@huves.co.jp

〒350-1317 埼玉県狭山市水の432-4